


РАБОЧЕЕ МЕСТО ОФТАЛЬМОЛОГА VS 2000

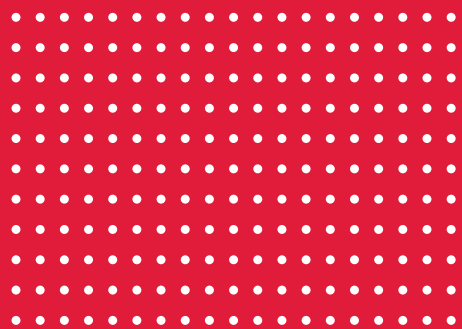

Модель VS 2000 включает в себя всё необходимое. Столешница компактного столика вращается вокруг своей оси, кресло с электроподъёмным механизмом регулируется по высоте. Откидывающиеся спинка и подлокотники способствуют обеспечению высокого уровня комфорта для пациентов. Подголовник можно поднимать и опускать, подстраиваясь под клиентов различного роста. В верхней части рабочего места офтальмолога располагается лампа, угол наклона которой можно изменять. Чтобы облегчить закрепление проектора знаков, производитель предусмотрел в VS 2000 встроенный кронштейн.

Аналогичная конструкция имеется и для фороптера.

Все элементы управления вынесены на переднюю часть корпуса. Есть размеры для подключения электрических приборов, подзарядки. Основным преимуществом VS 2000 являются компактные размеры. Стол, кресло и крепежи для офтальмологического оборудования занимают минимум площади в рабочем кабинете.

Технические характеристики:

Угол поворота кронштейна под фороптер	±30°
Размер столешницы	840 мм x 405 мм
Угол поворота столешницы	90°
Высота подъёма кресла	150 мм~200 мм
Нагрузка кресла	150-200 кг
Угол поворота кресла	±60°
Угол наклона подголовника	90°~135° или 140°
Высота подъёма подголовника	150 мм
Напряжение	110/220В
Флуоресцентная лампа	12 Ватт. (настраиваемая яркость)
Предохранитель	5А 250 В
Рабочая температура	-30°C~+50°C
Влажность	Менее 90 %
Габаритные размеры	1700 мм x 1740 мм x 2005 мм
Вес	175 кг

- Товар в наличии на нашем складе
- Отгрузка: 1-2 дня

